

Skin System® E



Dermoabrasore portatile per trattamento cutaneo

Portable dermoabrader for skin treatment

Dermoabrasor portátil para tratamiento cutáneo

 **smei**
SERVIZI MEDICO ESTETICI ITALIANI S.r.l.

Microdermoabrasione Controllata

Skin System E permette di effettuare dermoabrasioni controllate della cute tramite microcristalli di ossido di alluminio. Attraverso un manipolo dotato di testina monouso intercambiabile, i microcristalli abrasano la cute con aspirazione regolabile asportandone vari strati a seconda dell'inetestimento da trattare. Con questo trattamento viene rispettata la biologia dei tessuti, che non vengono maltrattati, ma dolcemente abrasati dalla finissima polvere dei microcristalli. Il trattamento non richiede l'uso dell'anestesia locale ed è ripetibile nel tempo. La durata e la frequenza delle sedute variano a seconda dei casi da trattare. Con la MDA controllata è possibile trattare efficacemente gli esiti di acne, piccole cicatrici e soprattutto le **smagliature**. Il trattamento provoca un ispessimento del derma, un rafforzamento della trama e il restringimento del vallo sottostante la smagliatura stessa.

IT

Controlled Microdermoabrasion

Skin System E carries out controlled microdermoabrasion by "firing" aluminium oxide microcrystals through a handpiece fitted with a disposable plastic nozzle. The layers of skin are abraded as required and suction may be adjusted to remove various layers of skin, depending on the blemish to be treated. Tissues are not damaged, because the extremely fine crystallised powder carries out gentle abrasion. The treatment does not require local anaesthetic and is performed on an outpatients basis. It can be repeated as and when required. With controlled MDA it is possible to treat effectively acne results, small scars and, above all, **stretch marks**. This treatment causes thickening of the derma, strengthening of the texture and shrinkage of the vallum underlying the stretch mark.

GB

Microdermoabrasione Controlada

Skin System E permite efectuar dermoabrasiones controladas del cutis mediante microcristales de óxido de aluminio. A través de un aparato manual equipado con cabeza monouso intercambiable, los microcristales abrasan el cutis con aspiración regulable, eliminando de éste varios estratos según el defecto que debe ser tratado. Con este tratamiento se respeta la biología de los tejidos, que no son maltratados sino suavemente abrasados por el finísimo polvo de los microcristales. El tratamiento no exige el uso de la anestesia local; se efectúa en forma ambulatoria y es repetible. La duración y la frecuencia de las sesiones varía según los casos a tratar. Con la MDA controlada es posible tratar eficazmente el acné, pequeñas cicatrices y sobretodo las **estrías**. El tratamiento provoca un espesamiento de la dermis, un reforzamiento de la trama y la contracción de la muralla inferior de la misma estría.


ES

Skin System® E

Dermoabrasore portatile per trattamento cutaneo

Portable dermoabradar for skin treatment

Dermoabrasor portátil para tratamiento cutáneo

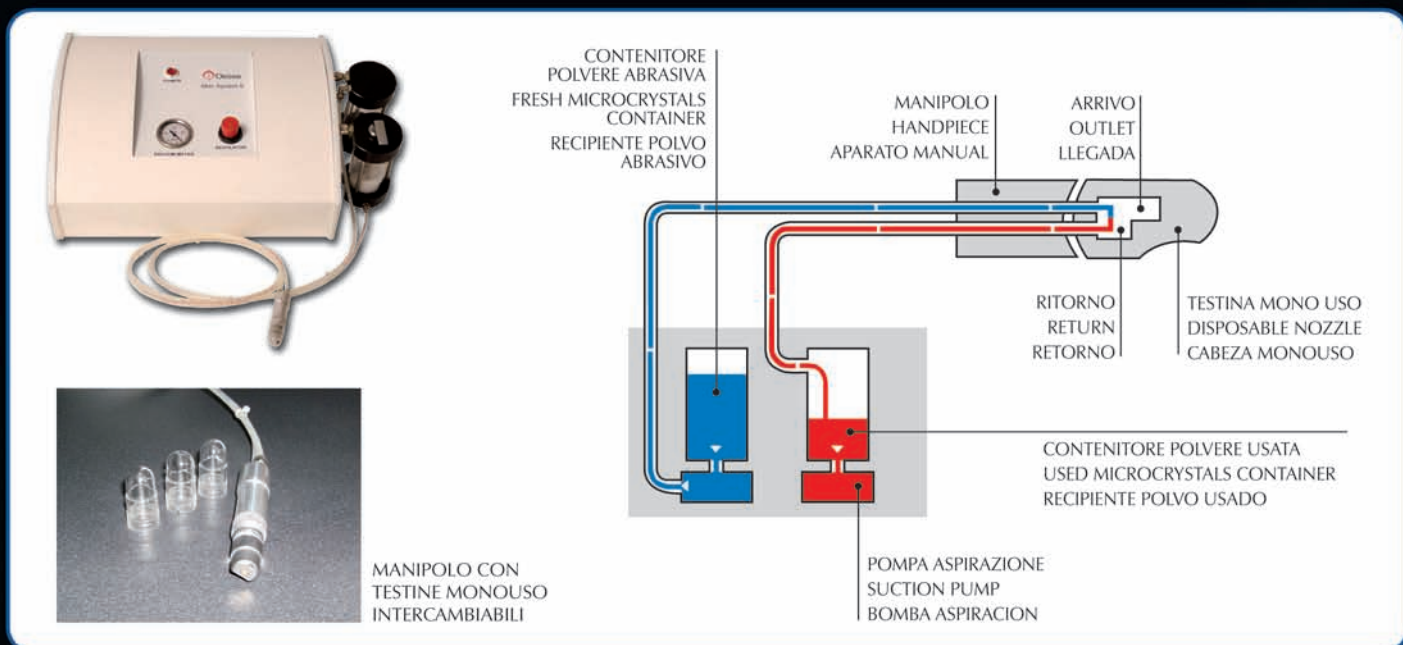

Indicazioni principali

- Smagliature
- Esiti di acne
- Macchie emoderiniche
- Esiti di varicella
- Piccole cicatrici del volto
- Cicatrici ipertrofiche
- Peeling viso
- Preparazione a chirurgia o medicina estetica
- Pretrattamento per successive applicazioni (veicolazione transdermica, laser, radiofrequenza, IPL)

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione 220v - 50 Hz
optional 110v - 50-60 Hz
- Assorbimento pompa aspirante 100 W
- Assorbimento totale 300 W
- Protezione con interruttore 0,5 kw
- Dimensioni 465x375x220 mm
- Larghezza totale 565 mm
- Peso 18 kg

IT

Main indications

- Stretch marks
- Acne scars
- Dark and pigmentation marks
- Chickenpox scars
- Small facial scars
- Hypertrophic scars
- Facial peels
- In preparation for aesthetic medicine or surgery
- Pretreatment for other applications (transcutaneous dielectrophoresis, laser, radiofrequency, IPL)

Technical characteristics

- Electrical supply 220v - 50 Hz
optional 110v - 50-60 Hz
- Suction pump absorption 100 W
- Total absorption 300 W
- Protection with switch 0,5 kw
- Dimensions 465x375x220 mm
- Width including containers 565 mm
- Weight 18 kg

GB

Principales indicaciones

- Desmolladuras
- Marcas dejadas por el acné
- Manchas hemoderinicas
- Marcas dejadas por la varicela
- Pequeñas cicatrices en el rostro
- Cicatrices hipertróficas
- Peeling rostro
- Preparación para la cirugía o medicina estética
- Pretratamiento para sucesivas aplicaciones (canalización transdermica, laser, radiofrecuencia, IPL)

Características técnicas

- Alimentación 220v - 50 Hz
opcional 110v - 50-60 Hz
- Absorción bomba aspiradora 100 W
- Absorción total 300 W
- Protección con interruptor 0,5 kw
- Dimensiones 465x375x220 mm
- Ancho con recipientes 565 mm
- Peso 18 kg

ES



SERVIZI MEDICO ESTETICI ITALIANI s.r.l.

Smei S.R.L - Via F. Negri, n.15 - 15033 Casale Monferrato (AL)

Tel. 0142.455445 Fax 0142.455446 | www.smei.it - info@smei.it

N. Verde 800.812.017