



Benvenuti nel nuovo mondo del "Resurfacing con RF frazionale regolabile"

Matrix RF utilizza una tecnologia unica sul mercato, con radiofrequenza frazionale, per offrire efficaci trattamenti cutanei frazionali controllati.

L'applicatore Matrix RF è il primo dispositivo medico estetico, non basato su luce o laser, in grado di creare ablazione regolabile e impatto del resurfacing, simulando gli effetti di diversi tipi di laser ablativi/di distruzione cellulare (coagulazione)/di riscaldamento utilizzati in varie applicazioni estetiche.

Durante il trattamento con Matrix RF, ciascun impulso emette la radiofrequenza attraverso una griglia di 64 spot a matrice, lasciando il tessuto circostante non trattato come serbatoio per favorire una rapida guarigione e ridurre le cure dell'intervento postoperatorio. Per trattamenti personalizzati, la tecnologia SelectPulse™ del sistema permette tre combinazioni di ablazione, distruzione cellulare e riscaldamento per trattare diverse condizioni della pelle e tutti i tipi di pelle, in modo sicuro.

Un prodotto frazionale versatile per supportare il Vostro successo

L'applicatore Matrix RF è il più recente prodotto Syneron che va ad aggiungersi alla linea di prodotti Matrix.

- Efficacia provata in esperimenti clinici condotti da dottori leader nel campo.
- Tecnologia frazionale regolabile – 3 programmi che emulano gli effetti sul tessuto delle comuni tecnologie laser frazionali ablative e coagulative.
- **La radiofrequenza è adatta a tutti i tipi di pelle** e ha il vantaggio clinico di permettere una diffusione del calore anche intorno all'area colpita - stimolando la produzione di collagene , ottenendo quindi la distensione della pelle.
- Tempo di guarigione minimo e livelli di dolore sopportabili, gestiti con anestetico topico.
- Trattamenti veloci – viso completo (20 minuti), collo, decolté e mani (10 minuti).
- Breve protocollo di trattamento: 3 sedute, a distanza di 4 settimane.
- Procedura molto richiesta , facile e sicura.
- L'applicatore ergonomico facilita l'attività dell'operatore.
- I trattamenti con Matrix RF aumentano la redditività del capitale investito dal dottore.

Punta dell'applicatore Matrix RF


Un importante aspetto di sicurezza dell'applicatore Matrix RF è la punta sterile, intercambiabile e a basso costo, utilizzata per i trattamenti. E' importante che la punta, che viene a contatto con il tessuto asportato mediante ablazione, sia unica per ogni paziente, eliminando qualsiasi rischio di contagio.

Trattamenti cutanei frazionali ablativi e di resurfacing

Rughe / Cicatrici / Cicatrici da acne / Lesioni della pelle superficiali / Irregolarità della texture / Lassità della pelle

SelectPulse™ - Il vantaggio clinico di Matrix RF

Matrix RF è dotato del sistema SelectPulse, che permette la regolazione della profondità di ablazione e della quantità di distruzione cellulare e riscaldamento, in base alle necessità del vostro paziente. E' possibile scegliere tra tre programmi per emulare i più comuni trattamenti presenti nei singoli sistemi frazionali.

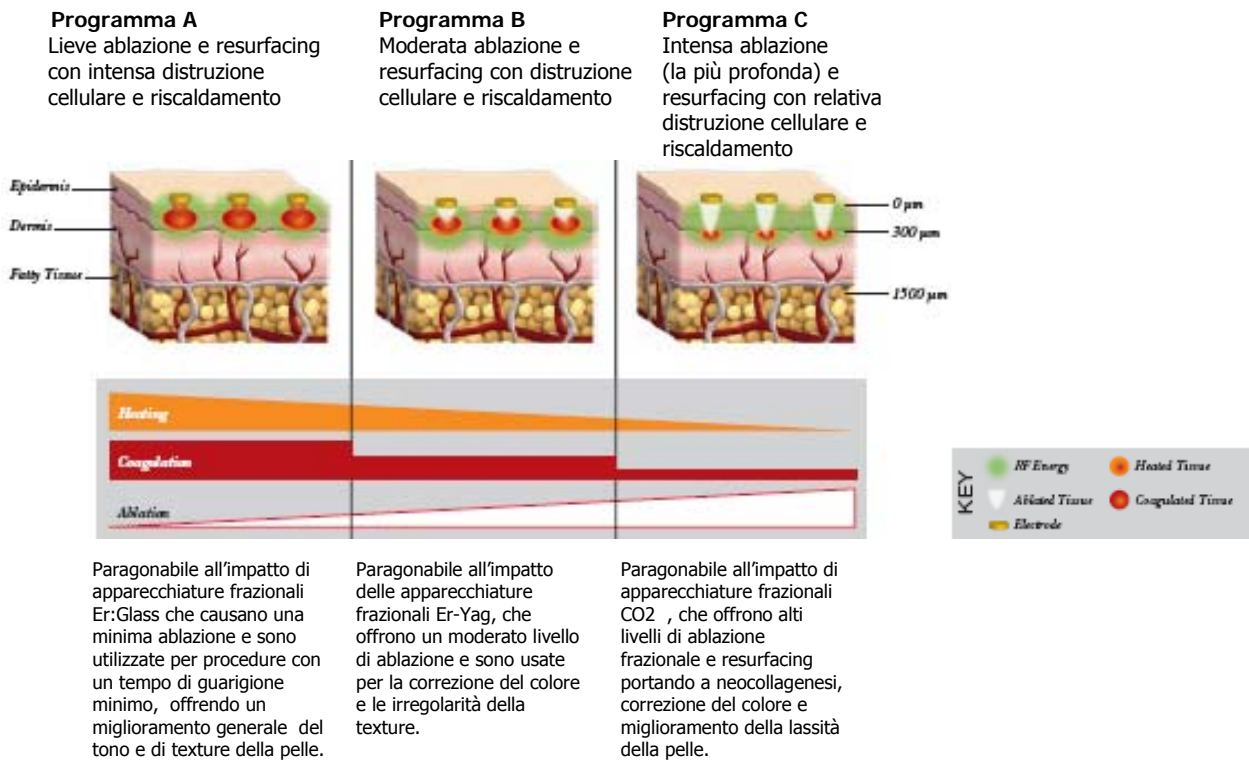

L'applicatore Matrix RF può essere utilizzato sui sistemi eMax™, eLaser™ ed eLight™, permettendovi di entrare a basso costo nel mercato dei trattamenti cutanei frazionali, che si sta espandendo sempre più. Matrix RF permette di effettuare una nuova procedura, sempre più richiesta, aggiungendola alla già ampia gamma di trattamenti offerti dalle piattaforme elōs di Syneron.

"Nelle mie prove, ho riscontrato che Matrix RF porta a un'unica combinazione di ringiovanimento della pelle, riduzione delle rughe, distensione della pelle e persino lifting con un minor tempo di recupero rispetto ai tradizionali trattamenti di ringiovanimento della pelle. I miei pazienti sono soddisfatti dei risultati veloci e visibili che ottengono, della pelle più uniforme, luminosa e rassodata, senza sacrifici di tempo. Penso che Matrix RF sia una tecnologia vincente che può competere con il CO2 frazionale." _ Amy Taub, M.D., Dermatologa, Illinois.

"Il tempo di trattamento è breve e l'applicatore Matrix RF è comodo da usare. E' eccellente per le rughe localizzate intorno agli occhi." – George Hruza, M.D., Dermatologo, Missouri.

Matrix RF - Dati tecnici del sistema

Peso dell'applicatore	0,3 Kg
Energia totale RF	Fino a 20 Joules
Matrice della punta intercambiabile	64 punti dell'elettrodo
Energia della gamma Matrix	Superiore a 300 mJ / MTZ *
Programmi di trattamento	Programma A, B o C
Dimensione dello spot della punta intercambiabile	12 x 12 mm
Punta intercambiabile	Fino a 125 impulsi

* MTZ - Zona Micro Termica